



Villa Manus

Käsiterapia

Lasta-aihiot ja materiaali- pakkaus Punkaharju

Sisällysluettelo

Lasta-aihiot Orfit Classic	s.	2 - 3
Materiaalipakkaus: Wrist extension		4
Lasta-aihiot Orfilight		4
Lasta-aihio Orfibrace		4
Materiaalipakkaus: Punkaharju		5
Punkaharjulan pukemisohe		6

Lasta-aihiot, Orfit Classic:

Oikean koon määrittäminen:	6 - 7 cm	Small
Mittaa käden leveys	8 - 9 cm	Medium
MCP nivelien kohdalta	10 - 11 cm	Large



Lyhyt peukalontuki "perhonen"

Gauntlet thumb post splint,
Materiaalina Classic 1,6 mm micro
Hyvä peukalon tuki estämättä käden käyttöä. Sopii reumaan, artriittiin, akuuttiin nivelside vammaan, rasituskipuun yms.

Pitkä peukalotuki

Complete thumb splint,
Materiaalina Classic 2 mm micro
Peukalon ja ranteen tuentaan esim. akuuteissa traumoissa

Ranne- peukalotuki

Wrist + thumb splint
Materiaalina Classic 2 mm micro
Perineteinen malli peukalon ja ranteen tuentaan esim. akuuteissa traumoissa. Hyvä sirkulaarinen tuki, ranneosa pidempi kuin yllä.

Ranteen sirkulaarinentuki

Cauntlet immobilization splint
Materiaalina Classic 2 mm micro
Ranteen tuentaa ja immobilisointiin. Muotoilunsa ansiosta tukeva vaikka materiaali on kevyt.

Ranteen Dorsovolaarinentuki

Dorsal cock-up splint
Materiaalina Classic stiff 3,2 mm sileä
Monipuoliseen ranteen tuentaan. Sopii myös dynaamisen lastan pohjaosaksi. Myös XS koko, kämmenen leveys 4 - 5 cm.



Lasta-aihiot, Orfit Classic:



Lepolasta

Intrinsic resting hand splint

Materiaalina Classic Soft 3,2 mm sileä

Peruslepolasta normaali tai hypotoniseen käteen



Lepolasta, anti-spastinen

Anti-spastic splint + thumb piece

Materiaalina Classic Stiff 3,2 mm sileä

Lepolastalla pidetään pitkät koukistajat venytettyinä (vähentäen spastisuutta)



Lepolasta, anti-spastinen

Intrinsic anti-spastic splint + thumb piece

Materiaalina Classic Stiff 3,2 mm sileä

Lepolastalla pidetään pitkät koukistajat venytettyinä (vähentäen spastisuutta)



Lepolasta, reuma

Rheumatoid arthritis resting splint

Materiaalina Classic Soft 3,2 mm sileä

Lyhyt sormiosa, pitkä peukalon tuki



Kevyt ulnaarideviaatiotuki


Ulnar drift splint

Materiaalina Classic stiff 3,2 mm sileä

Käden käytön mahdollistava tuki.

Huomaa vasen / oikea



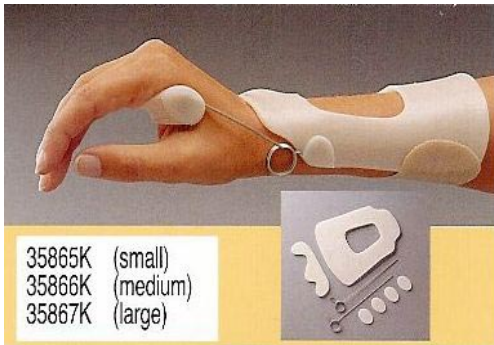

Materiaalipakkaus: Wrist Extension Assist

Kaikki mitä tarvitset dynaamisen rannetta ojentavan lastan valmistukseen.
Materiaalina Orfit Classic Soft 3,2mm
Koon valintaohje sivulla 2



Thumb post splint

Lasta-aihiot, Orfilight™

Peukalon "perhoslasta"

koko S	35810/L
M	35811/L
L	35812/L



Dorsal wrist cock-up splint

Ranne (dorsovolaarinen)

koko XS	35818/L
S	35820/L
M	35821/L
L	35822/L



Flexor tendon gliding splint

Saatavissa erillistilauksesta myös lasta-aihiot Kleinert lyhyt



Lasta-aihiot, Orfibrace™

Nilkka

Koko	XXS	0 - 10 v.	35980/OB
	XS	10 - 15 v.	35981/OB
	S	37 - 39 v.	35982/OB
	M	40 - 42 v.	35983/OB
	L	43 - 45 v.	35984/OB

PUNKAHARJULASTAN MATERIAALIPAKKAUS



Valmis lasta

Punkaharjulastaa suositellaan neurologisille asiakkaille joille ei tavallinen lepolasta sovi korkean spastisuuden vuoksi. Punkaharjulasta on helppo pukea, koska pukemisen voi tehdä ranne koukussa. Lasta jättää kämmenen vapaaksi ja vähentää sensorista ärsytystä eikä aktivoi tonuksen kohoamista. Muita Punkaharjulastan etuja on sen ilmavuus ja ranteen asennon säädettävyys. Sovituslastan avulla voidaan kokeilla lastan sopivuutta ja asiakkaan motivaatiota lastan käyttämiseen. Sovituslasta voidaan valmistaa ilman peukalo-osaa ja tällöin sovituksen yhteydessä harkitaan minkä tyyppinen peukalo-osa / ei peukalo-osaa on paras yksittäiselle asiakkaalle. Materiaalipakkaus sisältää kaikki Punkaharjulaan tarvittavat materiaalit ja se nopeuttaa lastan valmistusta huomattavasti.

Materiaalipakkauksen sisältö:



1. Lastan kaari
2. Orfit Eco™ matalalämpömuovi
3. Orfit Classic™ matalalämpömuovi
4. Fleece pehmuste
5. Koukkutarra liimalla
6. Tarranauhojen pehmuste (musta)
7. Leveä tarranauha + lenkki
8. Kapea tarranauha

Tuote nro 10174

**Punkaharjulastan
materiaalipakkaus**
(sisältö yllä)

10175

Lastan kaari

13.5.05

Punkaharjulastan on kehittänyt toimintaterapeutti Kirsti Niemi. Materiaalipakkaus on kehitetty yhteistyössä hänen kanssaan.

KÄSILASTAN PUKEMISOHJE

(Punkaharjunlasta)




Oikein puettu Punkaharjunlasta



1. Venytä kättä ohjeiden mukaisesti

2. Pue sormi-kämmenosa

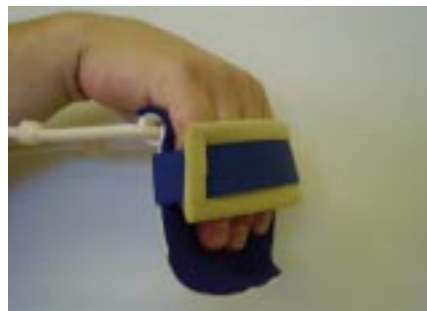

3. Sulje sormien yli poikittain menevä nauha



4. Kiinnitä kyynärvarsinauha löysästi tässä vaiheessa (vain jotta lasta pysyy paikoillaan, kiristys myöhemmin)



5. Venyttele rannetta suoraksi tai odota, että se rentoutuu

6. Kiinnitä rannenauha siten, että se kulkee "stopparien" takaa. Kiristä sopivaksi. Kiristä myös kyynärvarren nauha sopivaksi



Jos ranne jäi pukiessa koukkuun voit tarkistaa tilanteen hetken päästä ja kiristää nauhaa. Muuta tällöin myös muita nauhoja tarpeen mukaan



7. Tarvittaessa lisätukea käytä sormien yli poikkisuunnassa kulkevaa nauhaa. Huolehdi, että tarranauha pehmuste on ihoa vasten.

Lisätietoja tämän lastan pukemisesta: _____

Yhteystiedot: _____